



Force Fx

Bistouri électrique Mono - Bipolaire

Sécurisez votre geste chirurgical



Simple d'utilisation, Mode coupe et coagulation, technologie Bi-polaire adaptée à la chirurgie classique et cœlioscopique.

Technologie «Instant Response», sécurité REM,
Modes Coupe & Coagulation

Technologie «Instant response»

Cette technologie repose sur la reconnaissance et le calcul de l'impédance tissulaire en effectuant 200 contrôles par seconde. Elle ajuste automatiquement le voltage et le courant afin de délivrer une puissance constante et appropriée, quelque soit le type de tissu.



Porte électrode restérilisable
CP601010 E2100

Les points forts

3 modes de coupe

- Coupe légère pour tissus délicats
- Coupe pure propre et précise
- Mixte des coupes pour la coupe avec hémostase

3 modes Bi-polaire

- Précision
- Standard
- micro bi-polaire
- Technologie «Bas voltage» évitant les étincelles.

4 modes Coagulation

- La Dissiccation
- La Fulguration avec coagulation sans contact
- La Fulguration
- Spray, coagulation de grande surface


Accessoires



Pédale Monopolaire
CP604003 E6008B




Plaque Retour
CP601019 HRA5

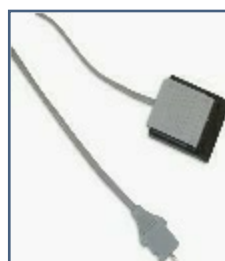

Câble plaque Retour
CP601002 E0560

ENDOSCOPIE

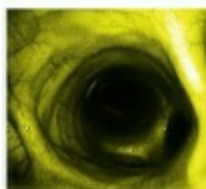

RADIOLOGIE



ÉCHOGRAPHIE



ENSEMBLE, INVENTONS L'IMAGERIE VÉTÉRAIRE DE DEMAIN

 OPTOMED

6, avenue des Andes, Bâtiment 6, 91940 Les Ulis
Tél. +33 (0)1 69 29 01 98 - Fax +33 (0)1 69 29 99 52
info@optomed.fr

www.optomed.fr